


Wycisk i model roboczy

blueSKY
SKY classic

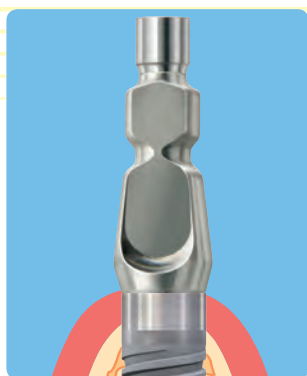

Transfer wyciskowy do metody zamkniętej, przy standardowej łyżce ułatwia odtworzenie pozycji dzięki:

- wyraźnie spłaszczonym ściankom
- głęboko horyzontalnym retencjom
- głębokim poprzecznym retencjom.

Transfer do metody otwartej, przy indywidualnej łyżce cechuje:

- wyraźna retencja
- krótki Torx® dla rozbieżnie ustawionych implantów.

Analog gwarantuje najwyższą precyzję, poprzez:

- wyraźną retencję
- zabezpieczenie antyrotacyjne.

Najlepsze efekty zarówno przy zamkniętej, jak i otwartej metodzie pobierania wycisku.

Wszystkie elementy wykonane są z tytanu kl. IV KV!



Transfer wyciskowy ze śrubą do metody otwartej

REF SKY-PA10



Transfer wyciskowy ze śrubą do metody zamkniętej

REF SKY-PA20



Analog implantu

REF SKY-IA4 0





Śruba do transferu do metody otwartej, krótka 6 szt.

REF SKY-PS18

Materiał: Tytan


Moment obrotowy: 10 Ncm

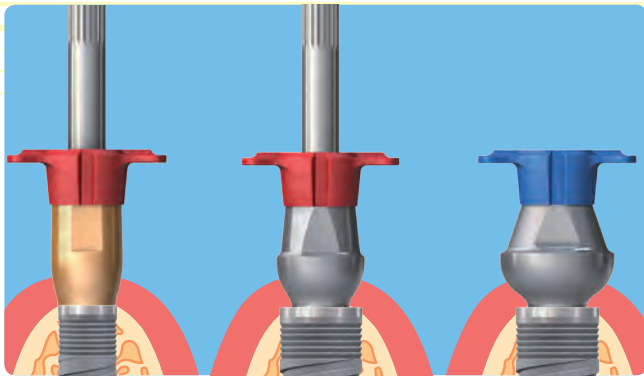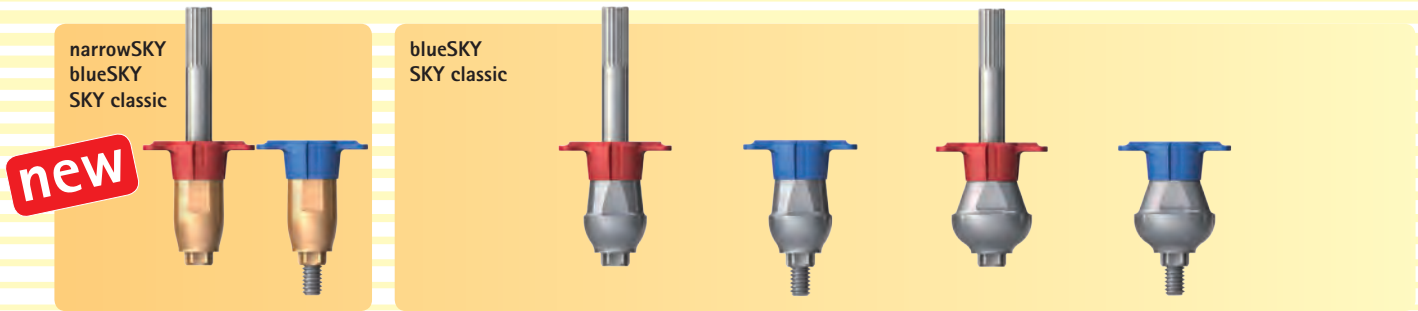

Transfery wyciskowe do metody otwartej i zamkniętej, dostępne są różnych rozmiarach. Transfery te, wyróżniają następujące cechy:


- kształt oparty jest na linii estetycznej SKY
- transfer posiada retencję koronową, na zasadzie zatrzasku, która jest idealnie dopasowana do okapowań wyciskowych
- istnieje 6 możliwych pozycji ułożenia okapowań na transferach, co zapewnia bezproblemowe pobranie wycisku nawet w małych przestrzeniach
- dostępne w rozmiarach S, M i L, zarówno do metody otwartej, jak i zamkniętej
- śruby są stabilnie przymocowane w transferach, co niweluje ryzyko ich wypadnięcia w czasie aplikacji.

SKY estetyczny transfer wyciskowy S ze śrubą 24 mm., do metody otwartej (narrowSKY)

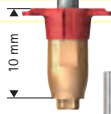


REF SKYESPA1

SKY estetyczny transfer wyciskowy M ze śrubą, do metody otwartej, dł. 24 mm

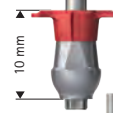

REF SKYEMPA1

SKY estetyczny transfer wyciskowy L ze śrubą, do metody otwartej, dł. 24 mm

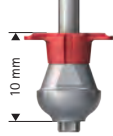

REF SKYELPA1

SKY śruba do estetycznych transferów wyciskowych, krótka 18 mm, 6 szt.




REF SKYAPS18

SKY estetyczne okapowanie wyciskowe do metody otwartej, 10 szt.



REF SKYEAK11

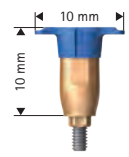


SKY estetyczny transfer wyciskowy S ze śrubą, do metody zamkniętej (narrowSKY)

REF SKYESPA2



SKY estetyczny łącznik wyciskowy M ze śrubą, do metody zamkniętej

REF SKYEMPA2

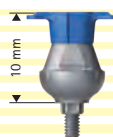

SKY estetyczny transfer wyciskowy L ze śrubą, do metody zamkniętej

REF SKYELPA2



SKY estetyczne okapowanie wyciskowe do metody zamkniętej, 10 szt.

REF SKYEAK22

Materiał: Tytan
Moment obrotowy: 10 Ncm

Wycisk
Model