

## Łączniki SKY uni.fit CAD


narrowSKY  
blueSKY  
SKY classic

**new**




Łączniki SKY uni.fit CAD są szczególnie odpowiednie dla projektowania i wytwarzania indywidualnych łączników z tlenku cyrkonu w systemie CAD/CAM. Indywidualne łączniki są adhezyjnie przydzielane do prefabrykowanej bazy w laboratorium.

Drobna konstrukcja z maksymalną powierzchnią adhezyjną stworzona jest dla niezawodnego długo-terminowego połączenia. Równoległe ścianki z optymalnym promieniem zapewniają doskonałe warunki frezowania w systemach CAM.

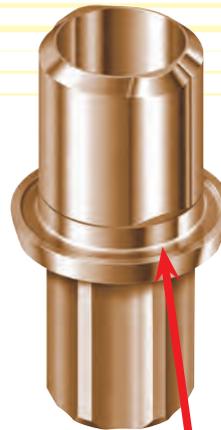


Prześciern dla nadmiaru spoiwa.

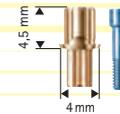

Łącznik SKY uni.fit CAD

REF SKYUFCAD

Materiał: Tytan  
Moment obrotowy: 25 Ncm

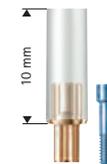


Łącznik SKY uni.fit CAD 3.5

REF SKYUFA35

Materiał: Tytan  
Moment obrotowy: 25 Ncm



Blokady rotacyjne po obu stronach powodują jednolity odstęp powierzchni adhezyjnych.

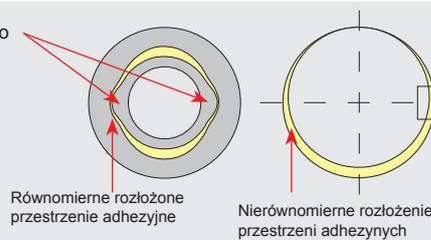

Blokada rotacyjna po jednej stronie powoduje nierównomierne przestrzenie adhezyjne.