



## Łącznik SKY uni.fit

blueSKY  
SKY classic

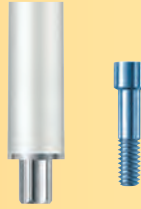

Szybko i łatwo wytwarzalne w laboratorium indywidualne łączniki. Dzięki 1° stożkowi, wszystkie powierzchnie są łatwe do skanowania i obróbki. Indywidualizacja przeprowadzana jest za pomocą compoForm UV i SERACOLL UV.

Łączniki te mogą być wykonane ze wszystkimi systemami CAD/CAM, frezarkami i technikami odlewniczymi, co daje możliwość wytwarzania ich z tytanu oraz dwutlenku cyrkonu.




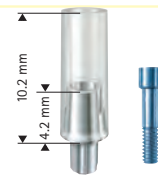


Łącznik SKY uni.fit  
ze śrubą 2.2

REF SKYUFA00

Materiał: Tytan  
Moment obrotowy: 25 Ncm

State uzupełnienia  
kosmetyczne

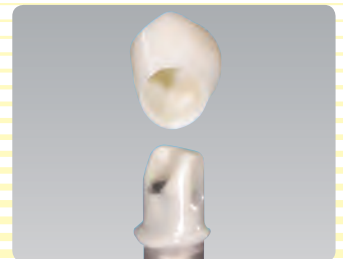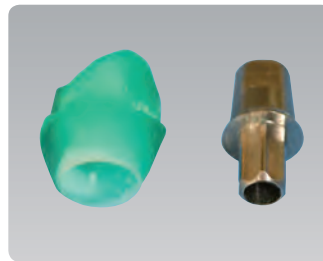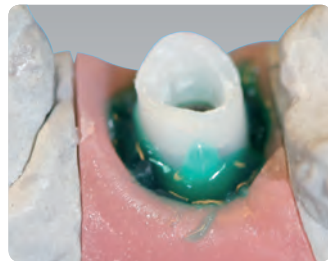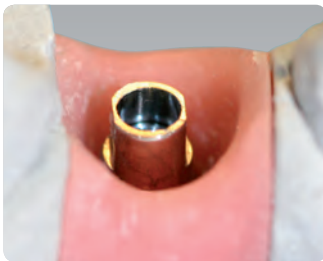

Zdjęcie: Dr. Alius, Nürnberg (DE)