



SKY estetyczna śruba gojąca

narrowSKY
blueSKY
SKY classic

new



blueSKY
SKY classic

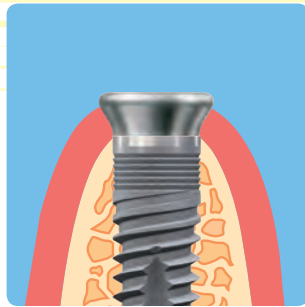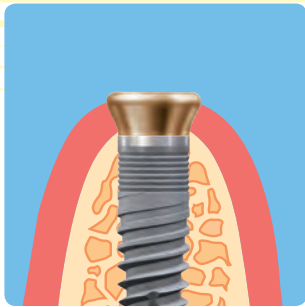

Estetyczna śruba gojąca SKY zapewnia optymalne ukształtowanie profilu wylania dla późniejszego zastosowania łączników estetycznych SKY.

Śruby dostępne są do dwóch platform:

- wąska S - narrow 3,5 mm
- regularna M, L - pozostałe średnice implantów (3,5 mm; 4,0 mm; 4,5 mm; 5,5 mm).

Rozmiar L przewidziany jest do zębów trzonowych.

Platforma wąska

SKY estetyczna śruba gojąca S
(narrowSKY) rozmiar S 2



REF SKYESG02

SKY estetyczna śruba gojąca S
(narrowSKY) rozmiar S 3



REF SKYESG03

SKY estetyczna śruba gojąca S
(narrowSKY) rozmiar S 4



REF SKYESG04

Platforma regularna

SKY estetyczna śruba gojąca M
rozmiar M 2



REF SKYEMG02

SKY estetyczna śruba gojąca M
rozmiar M 3



REF SKYEMG03

SKY estetyczna śruba gojąca M
rozmiar M 4



REF SKYEMG04

SKY estetyczna śruba gojąca L
rozmiar L 2



REF SKYELG02

SKY estetyczna śruba gojąca L
rozmiar L 3



REF SKYELG03

SKY estetyczna śruba gojąca L
rozmiar L 4



REF SKYELG04





Materiał: Tytan

Moment obrotowy: 10 Ncm

Protetyka

Specjalna śruba gojąca jako podstawa dla belek i łączników kulowych

blueSKY
SKY classic

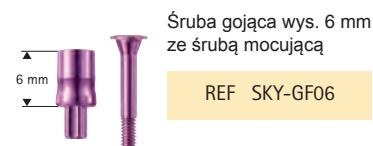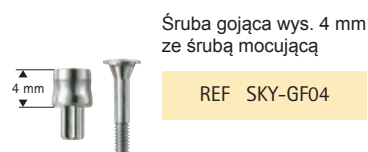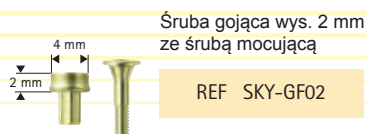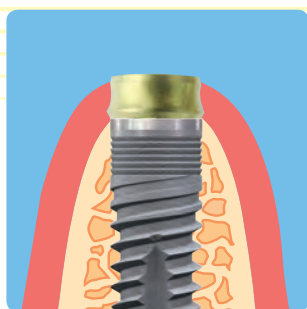

Opis:

Śruba gojąca w trzech wysokościach:

- 2 mm – złota
- 4 mm – srebrna
- 6 mm – czerwona

Służy jako podstawa dla konstrukcji belkowych i łączników kulowych. Poziome nacięcia zapobiegają odłączeniu się śruby gojącej od implantu, podczas domontowywania konstrukcji belkowej.

Zalety:

Lepsza kondycja dziąsła przy konstrukcjach belkowych i protezach kotwiczonych na łącznikach kulowych. Redukcja ilości potrzebnych elementów składowych.



Photo: Dr. Borrmann, Kornwestheim (DE)

Materiał: Tytan
Moment obrotowy: 10 Ncm