


## Terapia chrapania

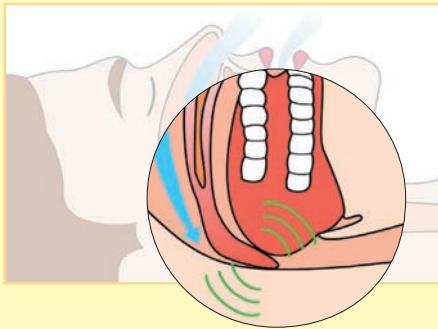


### Chrapanie chorobą społeczną...

w połowie sypialni spokojny, zdrowy sen jest zakłócony przez natarczywe, głośne chrapanie (które może dochodzić do 90 decybeli)!

Z przychodzącym wiekiem ponad połowa społeczeństwa ma problem z chrapaniem:

- 40 - 60 % ze zwykłym chrapaniem bez bezdechu
- 5 - 10 % z niebezpiecznym dla zdrowia chrapaniem chorobowym z bezdechem

Chrapanie nie tylko zabuża komfort snu przez swoją natarczywość i głośność, ale może być też przyczyną takich schorzeń jak np. nadciśnienie, arytmia, czy zawały serca.

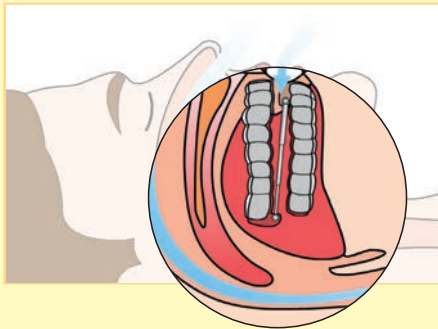

Skuteczność terapii intraoralną szyną protruzyjną przy lekkim lub średnim syndromie bezdechu podczas snu została udokumentowana wieloma badaniami i jest zalecenia przez Deutsche Gesellschaft Zahnärztliche Schlafmedizin (DGZS). Oczywiście przed leczeniem wymagana jest specyficzna, wewnątrzustna diagnostyka funkcjonalna.

Indywidualnie wykonywana intraoralna protruzyjna szyna (IPS) *SleepPlus* utrzymuje żuchwę podczas nocy mezialnie i w ten sposób wydawnie redukuje chrapanie.

## Szyna protruzyjna *SleepPlus*



System leczenia przy lekkim i średnim obstrukcyjnym bezdechu podczas snu (OSAS).

### Szyna protruzyjna

**SleepPlus**

**Szyna protruzyjna *SleepPlus* jest nowym i bardzo komfortowym dla użytkownika sposobem leczenia obstrukcyjnego chrapania. Innowacyjne teleskopowe stawy kulowe pozwalają na swobodne poruszanie żuchwą we wszystkich kierunkach podczas jej używania. Nakładki zgryzowe z estetycznego akrylu odpowiadają za odciążenie, czyli rozluźnienie i relaks mięśni podczas snu. Rozwinęty przez kliniczną ewolucję design szyny spotyka się z dużą akceptacją pacjentów. Z terapią leczenia chrapania za pomocą szyny protruzyjnej *SleepPlus* zwiększacie Państwo zakres swojej działalności zawodowej.**



Szyny teleskopujące, spoczynkowa stabilizacja żuchwy, przednia i boczne nakładki zgryzowe tworzą skuteczny aparat do leczenia chrapania.

### **bredent oferuje wsparcie:**


- warsztaty wykonywania szyn (certyfikowane)
- szkolenia kliniczne z leczenia chrapania (certyfikowane)
- instrumenty marketingowe
  - broszury dla pacjentów
  - plakaty do poczekalni
  - informacje o ośrodkach terapeutycznych na specjalnej stronie internetowej adresowanej dla pacjentów

## Protrusionsschiene *SleepPlus*



### Szyna protruzyjna **SleepPlus**

Teleskopowe szyny na kulowych stawach odpowiadają za możliwość wykonywania ruchów żuchwy we wszystkich kierunkach.

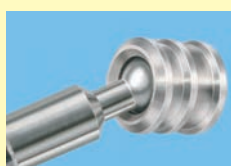

### Komponenty systemu i ich zalety:

- teleskopowe szyny są dostarczane z indywidualnie nastawnymi sprężynami, które dopasowują się do każdej wysokości zgryzu
- kulowe stawy umożliwiają ruchomość we wszystkich kierunkach
- zgryzowo wykonane teleskopy dają optymalny komfort noszenia
- podniesienie zgryzu odciąża staw skroniowo-żuchwowy i rozluźnia mięśnie
- opcjonalne kotwiczenie spoczynkowe żuchwy w komfortowej pozycji przedniej

### Państwa zysk:

- **zwiększenie profilu działalności**
- **pozyskanie nowej grupy pacjentów**

**SleepPlus**  
Plakat do poczekalni  
2 szt.  
REF 0P0008P L

**Manual instruktorzowy**  
**SleepPlus**  
1 szt.  
REF 000322P L

**SleepPlus**  
Broszura dla  
pacjentów  
20 szt.  
REF 000 2990P L

### Zestaw:

2 Szyny teleskopowe  
2 Sprężyny  
1 Klucz  
1 Patryca na śrubie  
1 Matryca zielona  
1 Matryca metalowa  
1 Tuleja gwintowana  
REF 580 0119 0

### Opakowania uzupełniające:

10 Szyn teleskopowych inkl. 10 Sprężyn	REF 580 0119 1
10 Sprężyn	REF 580 0118 1
1 Klucz	REF 580 0119 2
1 Patryca na śrubie vks-oc/sg 2,2 Titan	REF 450 0004 7
8 Matryc zielonych vks-oc Ø 2,2 mm	REF 430 0544 0
2 Matryce matalowe vks-oc Ø 2,2 mm	REF 430 0696 0
2 Tuleje gwintowane	REF 580 0119 3
1 Wkrętak krótki	REF 330 0069 0
1 Upychacz do matryc vks-oc Ø 2,2 mm	REF 430 0548 0

