


# Multisil-Epithetik transparent

Transparentny materiał na protezy, na bazie silikonu

Praktyczne strzykawki mieszające materiał w stosunku 1:1

- przejrzysty silikon do podbarwiania intensywnymi farbami
- długi czas pracy, do 2 godzin przy temp. pomieszczenia 23°C daje możliwość starannego indywidualizowania
- polimeryzacja w temperaturze 60°C eliminuje potrzebę posiadania specjalnych urządzeń
- twardość końcowa 35 Shore A, szczelne ale delikatne przyleganie daje pacjentowi komfort na codzień
- właściwa płynność silikonu umożliwia optymalne wymodelowanie indywidualnych detali

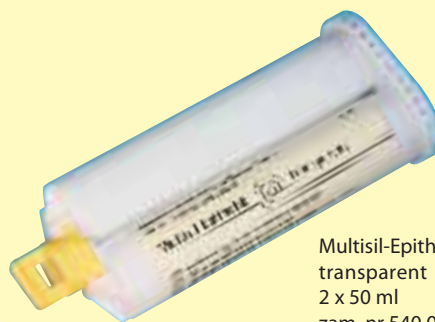

Multisil-Epithetik transparent  
2 x 50 ml  
zam. nr 540 0106 3



transparent

# Multisil-Epithetik city/country/beach

Barwne, miękkie, materiały na protezy, na bazie silikonu


- 3 różne kolory ułatwiają zabarwienie protez:  
city = jasna twarz  
country = normalna twarz  
beach = ciemna twarz
- transparent oszczędza czas przy indywidualizacji
- intensywne farby zwiększają możliwości indywidualizowania
- twardość końcowa 35 Shore A, szczelne ale delikatne przyleganie daje pacjentowi komfort na codzień
- dobra płynność silikonu to możliwość wykonania wszystkich detali



Multisil-Epithetik city  
50 ml  
zam.nr 540 0106 4



city

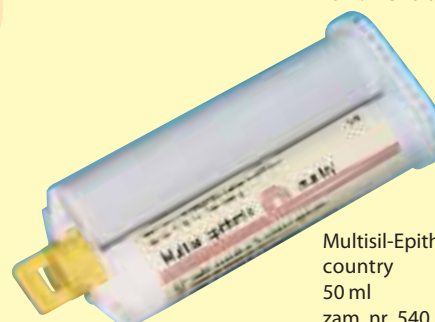

Multisil-Epithetik country  
50 ml  
zam. nr 540 0106 5



country



Multisil-Epithetik beach  
50 ml  
zam. nr 540 0106 6



beach