

## Szczotki standard



Miękka szczotka do polerowania trudno dostępnych miejsc.

## Abraso-Sil akryl



Szczotka pobierająca maksymalnie dużo pumeksu lub pasty w celu wygładzania dużych powierzchni.

## Abraso-szczotka akryli



Stabilizatory z materiału dozują pastę i stabilizują włosie podczas polerowania.

## Szmaciak wstępny akryl



Silikonowe krążki podczas polerowania z pumeksem dodatkowo gumkują protezę akrylową.

## Abraso-Soft akryli



Szczotka wykonana jest z miękkiego, koziego włosia. Abrazyjna wkładka chłonna magazynuje zawiesinę pumeksu lub pastę polerską i obracając się dozuje ilość materiału polerującego, czyniąc polerowanie dokładniejszym i szybszym.

## Irchy do akryli



Irchy dają perfekcyjny wysoki połysk. Powierzchnie akrylowe zostają pozbawiane retencji dla przyszłych osadów.

## Szmaciak-wysoki połysk



Znakomita politura dzięki permanentnej cyrkulacji chłodzącego powietrza.

## Abraso-Gum do akryli



Szybka pomoc przy naprawach i korekturach protez akrylowych.

## Szczoteczki na prostnicę



Cztery szmaciaki do wykonywania wysokiego połysku na akrylach i kompozytach.

# Polerowanie akryli

## Szczotki standard



Szczotka biała  
śr. 80 mm  
12 szt.  
REF 350 0034 0



Szczotka biała  
śr. 70 mm  
12 szt.  
REF 350 0030 0




Wąskie szczotki sprawdzają się przy polerowaniu dolnych protez.



Szczotka biała  
śr. 65 mm  
12 szt.  
REF 350 0074 0



Szczotka biała  
śr. 60 mm  
12 szt.  
REF 350 0075 0

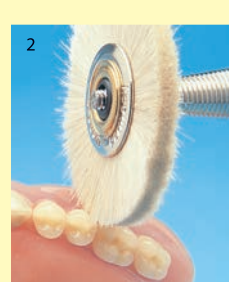

Wąska miękka szczotka łatwo dociera do trudnodostępnych elementów, dając dokładny połysk.



Szczotka biała  
śr. 50 mm  
12 szt.  
REF 350 0027 0



Wąska  
szczotka  
śr. 48 mm  
10 szt.  
REF 350 0061 0



Szczotka biała  
śr. 44 mm  
12 szt.  
REF 350 0024 0



Szczotka biała  
śr. 24 mm  
12 szt.  
REF 350 0102 3




Mandryla  
1 szt.  
REF 360 0116 8

## Abraso-Sil akryl



Specjalna szczotka do wstępnego polerowania akryli. Pomiędzy włosiem a abrazyjną wkładką chłonną znajdują się 2 silikonowo-liniane krążki. Szczotka nabiera dużo pumeksu lub pasty i szybko wykonuje polerowanie wstępne.

Abraso-Sil akryl  
śr. 80 mm  
1 szt.  
REF 350 0099 3  
śr. 50 mm  
REF 350 0102 2

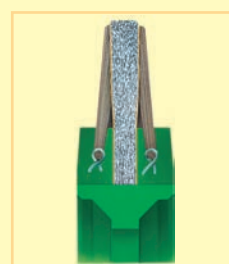

## Abraso-szczotka akryli



Specjalnie skonstruowana szczotka z koziego wlosia z tekstylnymi wkładkami chłonnymi magazynującymi i dozującymi podczas pole- rowania pumeks lub pastę polerską.

**Abraso – szczotka akryli**

śr. 50 mm  
1 szt.  
**REF 350 0102 4**

śr. 80 mm  
1 szt.  
**REF 350 0078 0**



Kombinacja koziego wlosia i specjalnej wkładki chłonnej dla past i pumeksu.



## Szmaciak wstępny



Szmaciak wstępny do akryli. Do intensywnego, szybkiego wygładzania. Stabilne silikonowe i lniane krążki agresywnie wygładzają powierzchnie akryli.

**Szmaciak wstępny**

śr. 80 mm  
1 szt.  
**REF 350 0099 1**

śr. 60 mm  
1 szt.  
**REF 350 0098 0**



## Abraso-Soft acryli



Szczotka wykonana jest z miękkiego, koziego wlosia. Abrazyjna wkładka chłonna magazynuje zawiesinę pumeksu lub pastę polerską i obracając się dozuje ilość materiału polerującego, co czyni polerowanie dokładniejszym i szybszym.


**Abraso-Soft akryli**

śr. 50 mm  
1 szt.  
**REF 350 0102 0**

śr. 80 mm  
1 szt.  
**REF 350 0080 0**



Również pumeks znakomicie wnika w wkładkę szczotki zapewniając skuteczniejsze polerowanie.

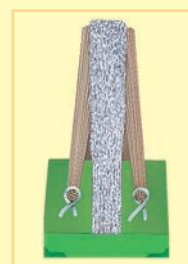

## Irchy do arkyli



Irchy polerskie Szybko przynoszą wysoki połysk. Irchy dają perfekcyjny wysoki połysk. Powierzchnie akrylowe zostają pozbawiane retencji dla przyszłych osadów.


**Irchy do akryli**

1 szt.  
śr. 60 mm  
śr. 80 mm  
śr. 100 mm

**REF 350 0099 0**

**REF 350 0036 0**

**REF 350 0035 0**

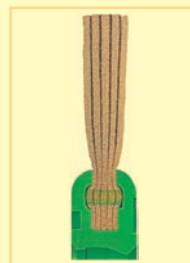

Irchami poleruje się akryle na wolnych obrotach: (1500 obr/min).



Cechą polerowania irchami jest obniżona temperatura podczas tarcia irchy o materiał, co daje wysoki połysk.

# Polerowanie akryli


## Szmaciak - wysoki połysk



Znakomita jakość pracy i duża trwałość szmaciaka.



Wysoka jakość wykonania szmaciaka, eliminuje kłaczenie podczas polerowania.

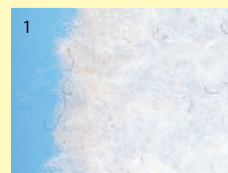

Specjalnie opracowany materiał zewnętrzny gwarantuje dużą stabilność.



Poszczególne krążki są łączone przy pomocy ultradźwięków, co daje większą stabilność podczas polerowania.



Specjalne, rzadko tkane krążki lniane zapewniają właściwą wymianę powietrzną co obniża temperaturę polerowania.

**Szmaciak-wysoki połysk**

1 szt.

śr. 60 mm REF 350 0094 0

śr. 100 mm REF 350 0082 0

## Abraso-Gum do akryli

Szybka pomoc przy naprawach i korekturach protez akrylowych.

Frezy Diatit cechuje duża wytrzymałość i skuteczne opracowywanie akryli.


Trzy różne abrazyjności gumek zapewniają właściwy efekt końcowy.




**Frez Diatit**  
1 szt.  
REF D 200 KF 23



Różny nacisk powoduje powstawanie nierównej powierzchni.

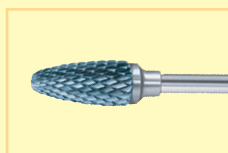

**Frez Diatit**  
1 szt.  
REF D 263 KG 60



### Zestaw

5-częściowy:

2 frez Diatit

1 gumka zielona

1 gumka szara

1 gumka czerwona


REF 350 0099 2



**Gumka zielona**  
1 szt.  
REF P 243 HG 10



Szara, średnia gumka poleruje wstępnie wygładzony materiał.

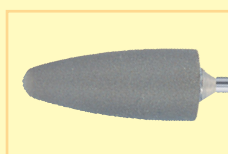


**Gumka szara**  
1 szt.  
REF P 243 HM 10



Zielona, gruba gumka wygładza nierówne powierzchnie.



Powierzchnia protezy po korekcie, bez rys ale z wysokim połyskiem.

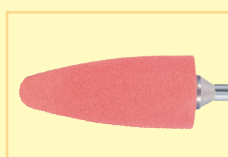

**Gumka czerwona**  
1 szt.  
REF P 243 HF 10



Czerwona, drobna gumka szybko poleruje na wysoki połysk.

## Zestawa do polerowania

Kompletny program polerowania protez akrylowych.



Abraso-Soft-Akryl

Abraso-szczotka

Szmaciak do  
wysokiego  
połysku

Pasta  
pumeksowa  
do akryli.

### Zestaw do polerowania:

- 1 x 150 g    Abraso-Star K50
- 1 x 500 g    Pasta pumeksowa
- 1 szt.        Abraso-Soft-Akryl
- 1 szt.        Abraso-szczotka
- 1 szt.        Szmaciak do połysku

REF 350 0084 0




Abraso-Star K50  
Wysoki połysk  
na akrylach.



## Polerowanie wstępne mikrosilnikami

Asortyment szczotek i szmaciaków do polerowania akryli i kompozytów.

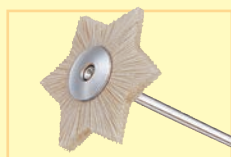

**Gwiazdka biała duża**  
15 szt.  
śr. 19 mm

REF 520 0015 1



Gwieździsty kształt umożliwia dotarcie do bruzd, szybko je polerując.



**Gwiazdka biała duża**  
15 szt.  
śr. 13 mm

REF 520 0014 1



Szybkie i skuteczne polerowanie przestrzeni międzyzębowych.



**Szczotka biała podwójna**  
15 szt.  
śr. 22 mm

REF 350 0055 0



Duża średnica i grubość umożliwiają szybkie, dokładne polerowanie licowań.



**Szczotka biała podwójna**  
15 szt.  
śr. 19 mm

REF 350 0054 0



Podwójna grubość szczotki daje właściwą stabilizację polerowania akryli i kompozytów.

## Nabłyszczające polerowanie końcowe

Cztery szmaciaki do wykonywania wysokiego połysku na akrylach i kompozytach.



**Szmaciak lniany**  
15 szt.  
śr. 22 mm

REF 350 0067 0



Nadaje wysoki połysk najtwardszym tworzywom.



**Bawełniak**  
15 szt.  
śr. 22 mm

REF 350 0065 0



Idealne polerowanie na superwysoki połysk wszystkich tworzyw, znakomity do polerowania wymodelowanych podniebień.



**Ircha**  
15 szt.  
śr. 22 mm

REF 350 0066 0



Przeznaczona do polerowania okolic przyszyjkowych i przejść kompozytów w metal.



**Filc**  
15 szt.  
śr. 22 mm

REF 350 0064 0



Trzyczęściowy filc dopasowuje się do każdej polerowanej struktury.