

Zestaw do polerowania akryli

Ten kompletny program polerski skraca o połowę czas pracy, dając niewiarygodne efekty kosmetyczne.

Dalsze informacje w dziale 12 katalogu.



Abraso-Soft Akryl
śr. 80 mm
1 szt.
REF 350 0080 0


Abraso-szczotka
śr. 80 mm
1 szt.
REF 350 0078 0

Szmaciak do wysokiego połysku
śr. 100 mm
1 szt.
REF 350 0082 0


Pasta pumekсова
do akryli i metali
3 x 500 g
REF 520 0016 0



Abraso Star K50
lekką abrazyjną
320 g
REF 520 0016 1

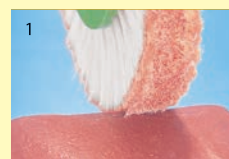

Pasta pumekсова wnika w gąbczastą strukturę wkładki chłonnej szczotki.

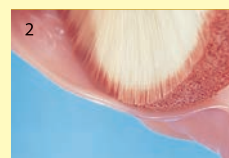

Szczotka obracając się dozuje odpowiednią ilość pasty potrzebną do polerowania.

Zestaw do polerowania REF 350 0084 0

1 x 150 g Abraso-Star K50 lekką abrazyjną
1 x 500 g Pasta pumekсова.
1 szt. Abraso-Soft Akryl
1 szt. Abraso-szczotka
1 szt. Szmaciak wys.poł.

Perfekcyjny połysk protez



Szczoteczki, bawełniaki, filce, irchy i pasty do wszystkich dentystycznych tworzyw sztucznych.



Bawełniak
śr. 22 mm
15 szt.
REF 350 0065 0



Szczotka gwiazdka biała,
śr. 19 mm
15 szt.
REF 520 0015 1



Szczotka gwiazdka biała,
śr. 13 mm
15 szt.
REF 520 0014 1



Szmaciak Iniany
śr. 22 mm
15 szt.
REF 350 0091 0



Ircha
śr. 22 mm
15 szt.
REF 350 0066 0



Filce
śr. 22 mm
15 szt.
REF 350 0064 0



Idealne polerowanie na super wysoki połysk wszystkich tworzyw, znakomity do polerowania wymodelowanych podniebień.



Precyzyjne i szybkie polerowanie bruzd i guzków powierzchni żujących.



Mała gwiazdka szybko i czysto poleruje powierzchnie międzyzębowe protez.



Nadaje wysoki połysk najtwardszym tworzywom.



Przeznaczona do polerowania okolic przyszykowych i przejść kompozytów w metal.



Trzyczęściowy filc dopasowuje się do każdej polerowanej struktury.

Produkty dodatkowe:



Acrypol-pasta polerska
Acrypol-polerowanie wstępne kompozytów, 170 g
REF 520 0017 0



Abraso-Star-Połysk
Uniwersalna pasta do superwysokiego połysku, 2 x 50 ml
REF 520 0016 3


Szczotki na polerkę



Abraso-Soft Akryl
Abrazyjna wkładka chłonna w szczotce magazynuje i dozuje pastę polerską podczas polerowania.

Porowata wkładka chłonna znakomicie poleruje powierzchnie akryli, a powietrze znajdujące się w jej gąbczastej strukturze skutecznie obniża temperaturę polerowania.

Abraso-Soft Akryl
śr. 80 mm
1 szt.
REF 350 0080 0

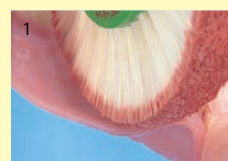


Kombinacja koziego włosia i specjalnej wkładki chłonnej dla past i pumeksu.



Również pumeks znakomicie wnika w wkładkę szczotki zapewniając skuteczniejsze polerowanie.

Szczotka wykonana jest z miękkiego, koziego włosia. Abrazyjna wkładka chłonna magazynuje zawieszoną pastę lub pumeks i obracając się, dozuje ilość materiału polerującego, co czyni polerowanie dokładniejszym i szybszym.

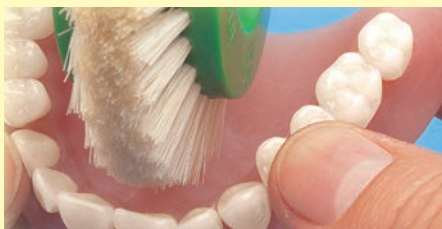

Szczotki na polerkę.
Wytrzymałe, wykonane z koziego włosia. Wytrzymałe i skutecznie polerujące szczotki docierające do wszystkich części protez.



Szczotka biała wąska
śr. 80 mm
12 szt.
REF 350 0034 0



Szczotka biała szeroka
śr. 65 mm
12 szt.
REF 350 0074 0



Szczotka biała wąska
śr. 70 mm
12 szt.
REF 350 0030 0



Szczotka biała wąska
śr. 60 mm
12 szt.
REF 350 0075 0



Szczotka biała wąska
śr. 50 mm
12 szt.
REF 350 0027 0



Wąska, miękka szczotka z koziego włosia.

Wąska, miękka szczotka łatwo dociera do trudnodostępnych elementów, szybko dając dokładny wysoki połysk.

Wąska szczotka
śr. 48 mm
10 szt.
REF 350 0061 0

Filce




Abraso - szczotka do akryli
Specjalna szczotka z koziego włosia z podwójną tekstylną wkładką chłonną do polerowania akryli.

Abraso-szczotka
śr. 80 mm
1 szt.
REF 350 0078 0



Szostkowy kształt szczotki umożliwia polerowanie w trudnodostępnych miejscach.

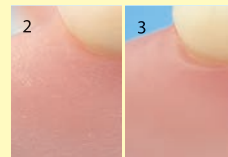

Powiększenie obrazu różni jakości polerowania protez akrylowych.

Specjalnie skonstruowana szczotka z koziego włosia z tekstylnymi wkładkami chłonnymi magazynującymi i dozującymi podczas polerowania pumeks lub pastę polerską.



Szmaciaki wstępne do akryli
Do intensywnego i szybkiego wygładzania.

Stabilne silikonowe i lniane krążki agresywnie wygładzają powierzchnie akryli.

Szmaciak silik. do akryli
śr. 80 mm
1 szt.
REF 350 0099 1

Szmaciak silik. do akryli
śr. 60 mm
1 szt.
REF 350 0098 0



Szybkie wygładzanie wstępne akrylowych części protez.



Dwie grubości i dwie średnice szmaciaków pozwalają dotrzeć do wszystkich części protez.


Filce



Szmaciaki do wysokiego połysku
1 szt.

śr. 60 mm REF 350 0094 0
śr. 100 mm REF 350 0082 0


Szmaciaki do wysokiego połysku
Znakomita jakość pracy i trwałość szmaciaków.

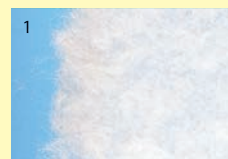

Specjalnie opracowany materiał zewnętrzny gwarantuje dużą stabilność.



Poszczególne krążki są łączone przy pomocy ultradźwięków, co daje większą stabilność podczas polerowania.

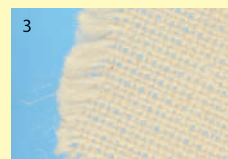

Specjalne, rzadko tkane krążki lniane zapewniają właściwą wymianę powietrza, co obniża temperaturę polerowania.



Wysoka jakość wykonania szmaciaków, eliminuje kłócenie podczas polerowania.



Irchy do akryli
1 szt.

śr. 80 mm, REF 350 0036 0
śr. 100 mm, REF 350 0035 0

Ircha do metali

1 szt.
śr. 60 mm, REF 350 0099 0


Irchy polerskie szybko przynoszą wysoki połysk.



Irchami polerować akryle na wolnych obrotach (1500 obr/min).



Cechą polerowania irchami jest obniżona temperatura podczas tarcia irchy o materiał, co daje wysoki połysk.

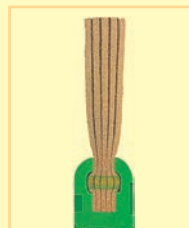

Irchy dają perfekcyjny i gładki wysoki połysk. Powierzchnie akrylowe zostają pozbawione retencji dla przyszłych osadów.