

Ergonom nóż do wosku

**Nożyk do manualnego modelowania.**

W jednym instrumencie skompensowano kilka zastosowań, które znacząco zwiększają skuteczność modelowania, skracając zarazem jego czas. Nożyk jest przewidziany dla prawo i leworęcznych techników.

**Ergonom
nóż do wosku
REF 310 0001 3**



1 Profiłowana krawędź wierzchołka ostrza pozwala szybko modelować girlandy kieszonek dziąsłowych.




2 Specjalny szlif krawędzi łyżki znakomicie ułatwia modelowanie łęgów zębodołowych.



3 Końcówka w kształcie łyżki szybko nakłada duże porcje wosku.



4 Właściwe nanoszenie wosku, skraca czas modelowania przestrzeni międzyzębowych.

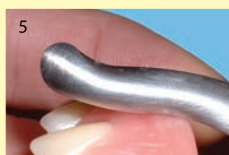

5 Boczne krawędzie łyżki nożyka szybko i właściwie formują przejścia i ranty protez.



7 Nożyk Ergonom pozwala w krótkim czasie, starannie wymodelować protezę o naturalnym, anatomicznym wyglądzie.

Penseta do licówek



Pewne trzymanie licówek i zębów podczas wyparzania oraz akrylowania przez lata było jednym ze zgłaszanych postulatów techników dentystycznych pracujących z akrylami.

Tradycyjne pensety nie wykonywały tego zadania należycie.

Penseta do licówek
1 szt.
REF 310 0011 5




- specjalne końcówki dla pewnego utrzymania
- twarda stal szlachetna dla długiej żywotności
- ergonomiczny chwyt gryfa
- mniejsza końcówka dla trudnodostępnych przestrzeni



1 Specjalne, retencyjne zęby są odpowiedzialne za pewne uchwycenie elementu...




2 Zagięcie końcówek optymalizuje ich pracę z różnymi kształtami przenoszonych przedmiotów.

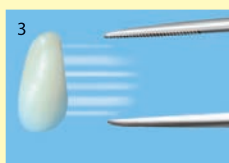

3 i wyeliminowanie wad klasycznych penset.



4 Kleszczyki znakomicie sprawdzają się również w pracy z mikroelementami protetycznymi.

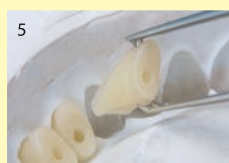

5 Pewne i szybkie przenoszenie zębów i licówek podczas akrylowania to nowa jakość pracy. Doceni każdy, kto choć raz gonił licówkę po pracowni...

Strzykawka termiczna



Strzykawka termiczna
REF 110 0121 1



1 Po ogrzaniu metalowego czubka pałeczkę woskową umieścić we wnętrzu strzykawki.



2 Popychając kciukiem pałeczkę rozgrzewa się jej czoło, które uchodząc ze strzykawki pewnie skleja obiekty.

Produkty dodatkowe:



Pałeczki klejące

250 g

REF 510 0070 1

1000 g

REF 510 0070 0

Szybkie i pewne klejenie każdego modelu. Po podgrzaniu wosk dokładnie i czysto aplikuje się na żądaną powierzchnię modelu.

Posi-boy



Pomocna „trzecia ręka“ przy akrylowaniu szkieletów na zimno.

Stabilna, regulowana podstawa ułatwiająca zalewanie przedlewów płynnymi masami akrylowymi. Koniec z pęczęzami, blazami i niedolewkami w protezach.

Posi-boy
REF 360 0101 0



Stabilna, podstawa ze stopniową regulacją, wykonana z nierdzewnej stali przeznaczona do pracy w garnkach ciśnieniowych.


Chwytek do kalki artykulacyjnej



Koniec z odkładaniem prostnicy na stół podczas kontroli artykulacji. Ergonomia to komfort w pracy!



Chwytek do kalki
roz. 1
1 szt.
REF. 360 0121 7

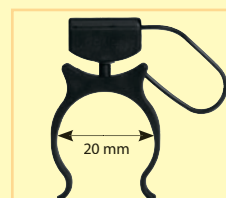

Chwytek do kalki
roz. 2
1 szt.
REF 360 0122 0

Produkty dodatkowe:



Diament do ustawek
1 szt.
REF 340 0101 0